

# MASTER XD

SISTEMA TROCORADIOGRAFICO POLIFUNZIONALE



**GILARDONI**

# MASTER XD

SISTEMA TOTALMENTE INTEGRATO PER INDAGINI TROCORADIOGRAFICHE GENERALI E DI PRONTO SOCCORSO STUDIATO PER L'USO DI DETETTORI PER RADIOLOGIA DIGITALE (FLAT PANEL) CHE CONSENTE, IN MODO SEMPLICE E RAPIDO, UNA VASTA GAMMA DI ESAMI.

- Proiezioni in antero-posteriore, laterali ed oblique con paziente disteso.
- Teleradiografie ed altri tipi di indagini e proiezioni con paziente eretto.

L'impianto è costituito da uno stativo pensile

per il supporto della sorgente RX, da uno stativo contenente il detettore (flat panel) e da un tavolo radiologico elevabile con piano in fibra di carbonio.



## STATIVO PENSILE PORTA TUBO RX

- Movimento verticale manuale e motorizzato con funzionamento asservito al movimento del Flat Panel
  - Movimenti trasversali e longitudinali manuali
  - Rotazione della sorgente RX per proiezioni oblique
- Collimatore luminoso a campo quadro, automatico in funzione della distanza fuoco-film e del formato



selezionato, con possibilità di intervento manuale.

- Display LCD con indicazione delle distanza tra sorgente radiogena e Flat Panel, degli angoli d'incidenza per la rotazione sull'asse orizzontale.

### STATIVO PER FLAT PANEL

- Movimento verticale manuale, sincronizzato con il movimento della sorgente RX.
- Rotazione motorizzata del Flat Panel per teleradiografie, proiezioni orizzontali ed oblique.




- Camera per il controllo automatico dell'esposizione.
- Griglia antidiffusione ad alta trasparenza e risoluzione.

### TAVOLO RADIOLOGICO MOBILE

- Piano porta paziente flottante in fibra di carbonio.
- Movimento verticale motorizzato, escursione continua con tre posizioni di stop programmate.
- Agevolmente rimovibile nel caso necessiti il disimpegno della sala per esami su paziente barellati o in situazioni di emergenza



# MASTER XD

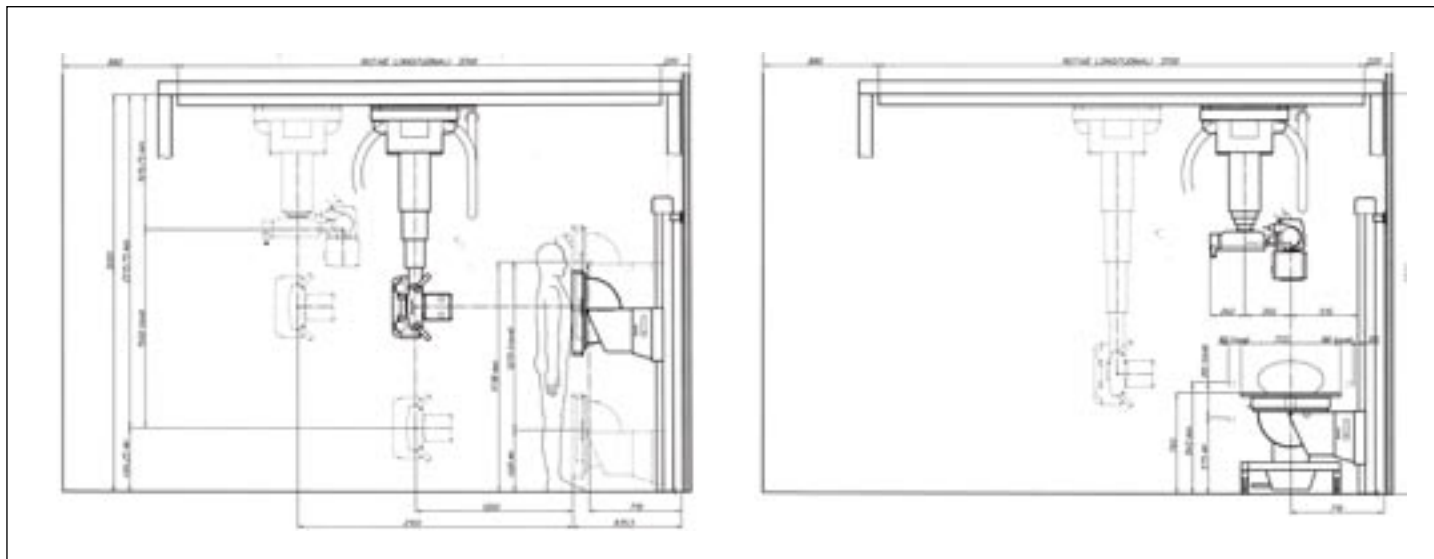

Con riserva di modifiche e miglioramenti

LABORATORI DI RICERCA riconosciuti "Altamente Qualificati" con D.M. 9-10-1985 – L.46/82 art.4

*Direzione e stabilimento:*

Via **Arturo Gilardoni**, 1 - 23826 Mandello del Lario (LC) - Italy

tel. (+39) 0341-705.111 - fax (+39) 0341-735.046

e-mail: [gx@gilardoni.it](mailto:gx@gilardoni.it) - [www.gilardoni.it](http://www.gilardoni.it)

*Export department:*

tel. (+39) 0341-705.225 - 0341-705.241

*Sede:*

Piazza Luigi di Savoia, 28 - 20124 Milano - tel. (+39) 02-669.05.38 - 02-669.07.37

*Filiale:*

Via dei Foscari, 7 - 00162 Roma - tel. (+39) 06-442.907.17 - 06-442.912.38

fax (+39) 06-442.912.94

*Centri di assistenza  
e uffici commerciali:*

in ogni Regione

