


XL

Barella radiotrasparente stretcher



Barella con piano d'esame radiotrasparente

Barella con piano d'esame radiotrasparente montata su ruote piroettanti, due delle quali sono dotate di leva di azionamento del blocco freno. Il piano d'esame è in laminato plastico radiotrasparente con longheroni laterali in alluminio estruso e guide per l'inserimento degli accessori. Pratiche maniglie di testa facilitano la manovrabilità della barella mentre il piano d'esame è curato nella realizzazione ai fini di consentire la sua rapida e facile pulizia. La barella è particolarmente adatta per l'indagine radiologica d'urgenza nei reparti di pronto soccorso.

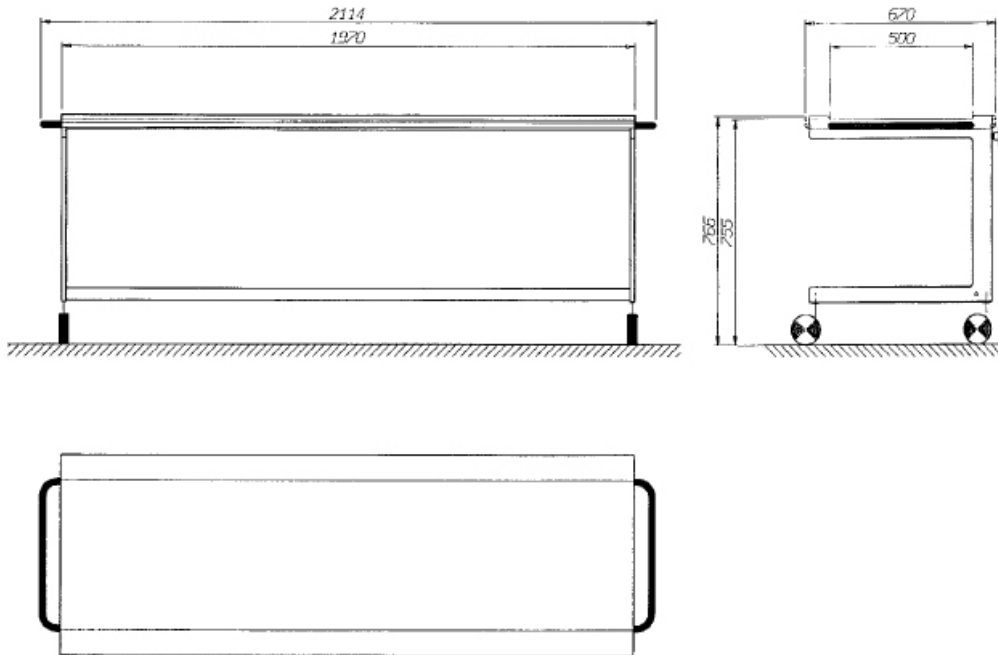

Stretcher with table top translucent XL

Stretcher mounted on wheels with translucent plastic material top and lateral rails for accessories. Of lightweight, sturdy construction, easy to position, it represents the ideal solution for moving the patient in the emergency examinations and casualties rooms.

La barella è disponibile nella versione con il bucky scorrevole sotto il piano portapaziente. Il bucky è del tipo a griglia fissa con portacassette standard per formati fino a 35x43 cm.

The stretcher table is supplied with an undertable sliding frame. This is the model with fix grid and standard cassette holder for size up to 35x43 cm

Con riserva di modifiche e miglioramenti /Reserving the right to improve and modify

LABORATORI DI RICERCA riconosciuti "Altamente Qualificati" con D.M. 9-10-1985 - L.46/82 art.4
Acknowledged as "HIGHLY QUALIFIED LABORATORY" with decree D.M. 9-10-1985 - L.46/82 art.4

Direzione e stabilimento:
Head office and facilities

Via **Arturo Gilardoni**, 1 - 23826 Mandello del Lario (LC) - Italy
tel. (+39) 0341.705.111 - fax (+39) 0341.735.046
e-mail: ucmedicale@gilardoni.it - www.gilardoni.it
tel. (+39) 0341.705.225 - 0341.705.241

Export department:

Sede:

Piazza Luigi di Savoia, 28 - 20124 Milano - tel. (+39) 02.669.05.38 - 02.669.07.37

Filiale:

Via dei Foscari, 7 - 00162 Roma - tel. (+39) 06.442.907.17 - 06.442.912.38
fax (+39) 06.442.912.94

Centri di assistenza
e uffici commerciali:

in ogni Regione

