

XL/E


Barella elevabile
Elevating stretcher



Il tavolo è costituito da una struttura metallica, montata su 4 ruote dotate di freno, che sostiene un piano d'esame in laminato plastico stratificato radio-trasparente e asportabile. Le gambe del tavolo sono telescopiche ed indipendenti per consentire di variare in altezza e in inclinazione la posizione del piano d'esame. Il movimento di elevazione è assistito da martinetti a gas la cui spinta verso l'alto serve a compensare il peso del paziente a bordo del tavolo. Due maniglie, di testa al piano d'esame, sono comodi e sicuri appigli per il posizionamento e la movimentazione del tavolo. Guide in acciaio ai lati del piano d'esame consentono il fissaggio degli accessori.

La barella si presta particolarmente per la movimentazione e il posizionamento del paziente nell'indagine radiologica generale e di pronto soccorso.

The table is composed by a metallic structure and mounted on four wheels with brakes; the metallic structure supports a radiotransparent stratified plastic material and removable top. The table legs are telescopic and independent to permit the variation of the patient table top height and inclination. The elevating movement is supported by gas jacks, whose upward push counterweights the weight of the patient lying on top. Two handles, which are on table top headboard, are comfortable and safe grips for the table positioning and moving. The table top also has steel lateral guides which permit the accessories fixing.

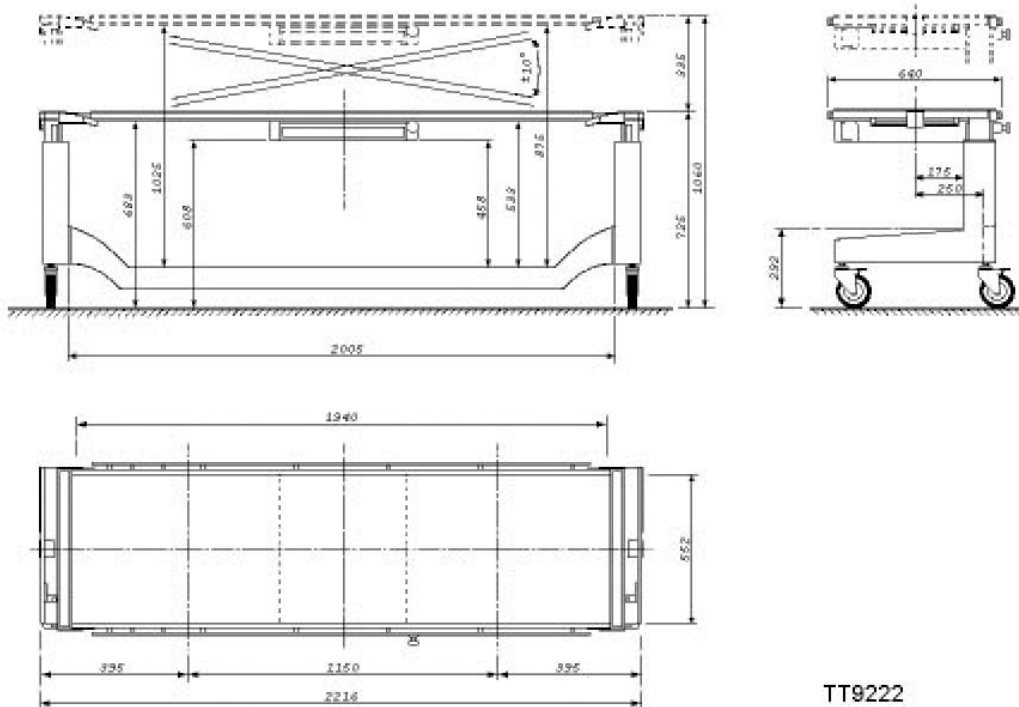

TT9222

La barella è disponibile nella versione con il bucky scorrevole sotto il piano portapaziente. Il bucky è del tipo a griglia fissa con portacassette standard per formati fino a 35x43 cm.

The elevating stretcher table is supplied with an undertable sliding frame. This is the model with fix grid and standard cassette holder for size up to 35x43 cm

Con riserva di modifiche e miglioramenti /Reserving the right to improve and modify

LABORATORI DI RICERCA riconosciuti "Altamente Qualificati" con D.M. 9-10-1985 - L.46/82 art.4
Acknowledged as "HIGHLY QUALIFIED LABORATORY" with decree D.M. 9-10-1985 - L.46/82 art.4

Direzione e stabilimento:
Head office and facilities

Via **Arturo Gilardoni**, 1 - 23826 Mandello del Lario (LC) - Italy
tel. (+39) 0341.705.111 - fax (+39) 0341.735.046
e-mail: ucmedicale@gilardoni.it - www.gilardoni.it
tel. (+39) 0341.705.225 - 0341.705.241

Export department:

Sede:

Piazza Luigi di Savoia, 28 - 20124 Milano - tel. (+39) 02.669.05.38 - 02.669.07.37

Filiale:

Via dei Foscari, 7 - 00162 Roma - tel. (+39) 06.442.907.17 - 06.442.912.38
fax (+39) 06.442.912.94

Centri di assistenza
e uffici commerciali:

in ogni Regione

